


WALTZ[®]

Sistema de Stent Coronario CoCr

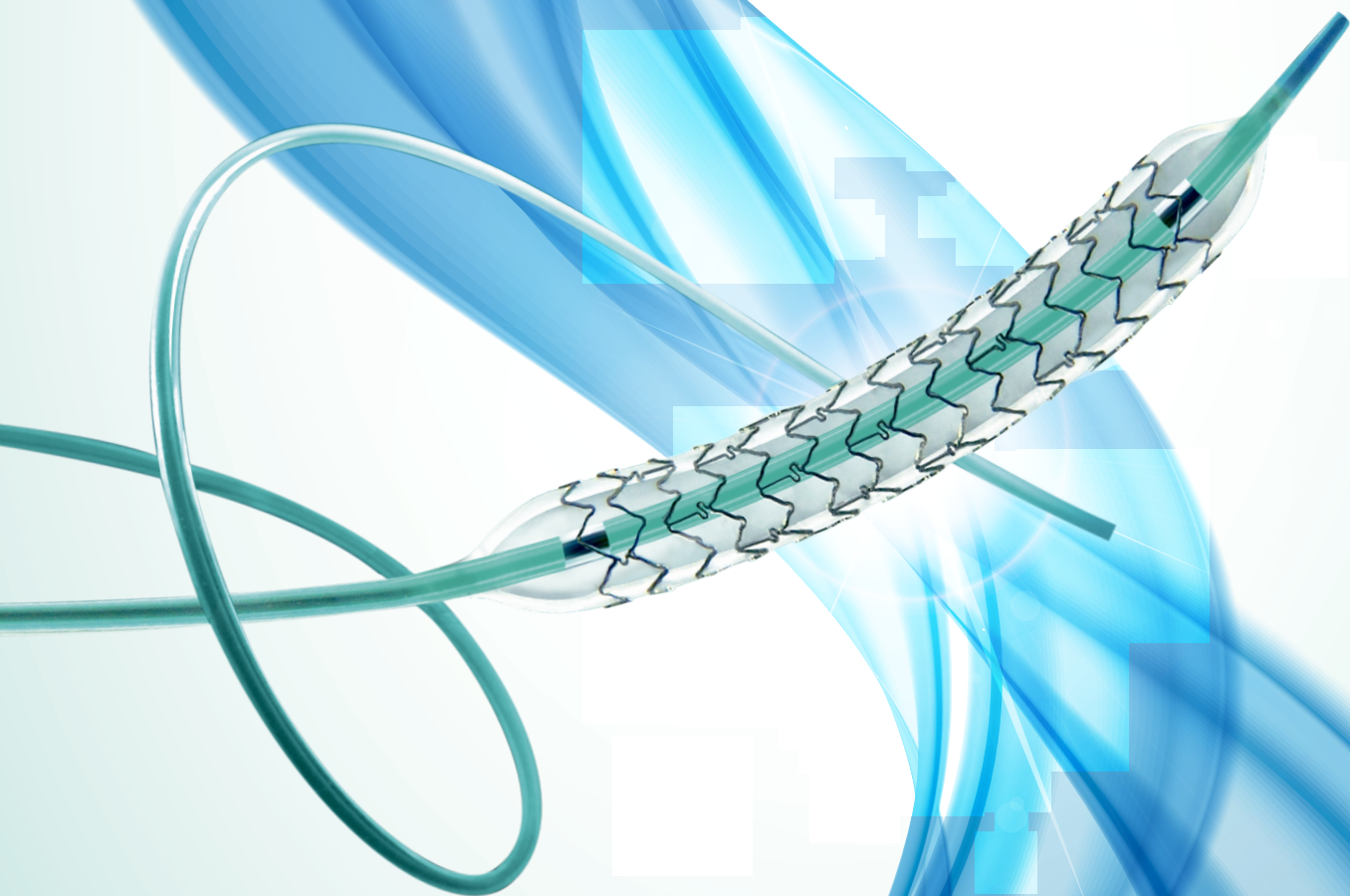

WALTZ®

Sistema de Stent Coronariano CoCr

O Design Refinado da Plataforma do Stent Combina Força Radial e Flexibilidade

- A liga de Cromo-Cobalto do Stent proporciona alta força radial
- A tecnologia do *Strut* (Filamento do Stent) fino aumenta o acesso à lesão e conformabilidade da parede do vaso
- A onda senoidal uniforme e os links "S" oferecem excelente balanceamento entre força de suporte e flexibilidade
- Três diferentes designs de modelos de Stent permitem melhor cobertura vascular e conformabilidade
- Excelente acesso ao ramo lateral

Sistema Aprimorado de Entrega e Acesso à Lesão

- O design superior da ponta aumenta a flexibilidade e o cruzamento
- O perfil baixo aumenta a navegabilidade e empurrabilidade

Especificações

Material do Stent	Liga CoCr L605
Design do Stent	Célula aberta
Espessura do <i>Strut</i> (Filamento do Stent)	0.0034"
Perfil de Cruzamento	0.037" (min)
Área de cobertura de metal	11.6% - 14.3%
Sistema de Entrega	Troca Rápida
Pressão Nominal (PN)	9 atm
Pressão de Ruptura (RBP)	16 atm para Ø 2.25mm - Ø 3.5mm
	14 atm para Ø 4.0mm

Medidas Disponíveis

Ø / Comprimento	13mm	16mm	18mm	23mm	29mm	33mm
2,25mm	TG2213	--	TG2218	TG2223	--	--
2,50mm	TG2513	TG2516	TG2518	TG2523	TG2529	TG2533
2,75mm	TG2713	TG2716	TG2718	TG2723	TG2729	TG2733
3,00mm	TG3013	TG3013	TG3018	TG3023	TG3029	TG3033
3,50mm	TG3513	TG3516	TG3518	TG3523	TG3529	TG3533
4,00mm	TG4013	--	TG4018	TG4023	TG4029	TG4033



MicroPort Scientific Vascular Brasil
Alameda Santos 336, 10º andar, CEP 01418-900, São Paulo - SP, Brazil
Tel.: +55 11 4301 3617
Website: <http://www.microport.com> E-mail: brasil_sac@microport.com

Todas as marcas registradas citadas pertencem aos respectivos proprietários em seus países de origem. Estes dispositivos só devem ser utilizados sob recomendação prescrita por médicos para o tratamento de doenças cardíacas. Indicações, contraindicações e alertas sobre possíveis eventos adversos podem ser encontrados nas instruções de uso e rótulos de cada um dos produtos. Estes dispositivos não podem ser promovidos, distribuídos e vendidos em países onde os certificados de registro, ou outras licenças, não forem obtidos. Este folheto também tem divulgação vedada nestes países e deve ser entregue exclusivamente a profissionais habilitados, para referência. Não deve também ser distribuído amplamente como propaganda. Qualquer informação pode ser alterada sem prévio aviso.

© 2015 Shanghai MicroPort Medical (Group)Co., Ltd. Todos os direitos reservados.



Versão N° BR-WTZ-0519-01